

Guia Rápido NovoPen® 6 e NovoPen Echo® Plus



Registo automático
e fiável de injeções
de insulina a
acontecer aqui



NovoPen® 6))
NovoPen Echo® Plus))

Este é um guia rápido. Para mais informações, consulte as instruções de utilização no Manual do Utilizador que vem com a NovoPen® 6 e a NovoPen Echo® Plus.

Prepare a sua NovoPen® 6 ou NovoPen Echo® Plus



Introduza um cartucho de insulina

Retire a tampa da caneta. Desenrosque o invólucro do cartucho. O êmbolo pode ficar saído para fora da caneta. Se isso acontecer, pressione-o completamente para dentro até parar.




Segure no invólucro do cartucho e deixe o cartucho deslizar para dentro do mesmo com a extremidade com rosca em primeiro lugar. Volte a enrosca o invólucro do cartucho até sentir ou ouvir um estalido.



Coloque uma agulha nova

Retire o selo de proteção. Coloque a agulha a direito na caneta. Enrosque-a até ficar bem firme. Retire as proteções exterior e interior da agulha. Guarde a proteção exterior da agulha.

Faça a sua administração

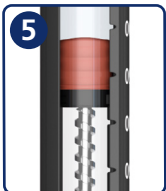

⚠ Teste SEMPRE o fluxo de insulina

Selecione 2 unidades e pressione o botão injetor até o marcador de doses marcar "0". O teste de fluxo de insulina estará completo quando vir um esguicho de insulina a sair pela ponta da agulha e não existir qualquer espaço vazio entre a cabeça preta do êmbolo e o êmbolo do cartucho.

Selecione a sua dose

Puxe o botão injetor. Certifique-se de que o marcador de doses marca "0" antes de começar. Rode o botão injetor para selecionar a dose de que necessita.

Injete a sua dose


Insira a agulha. Pressione o botão injetor até o marcador de doses marcar "0". Conte lentamente até 6 antes de retirar a agulha da sua pele. Retire a agulha em segurança e deite-a fora. Coloque de novo a tampa da caneta.

Como verificar a sua última dose



Puxe o botão injetor

Certifique-se de que o marcador de doses mostra "0" antes de começar.

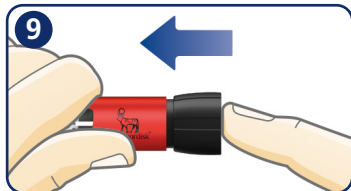

Pressione o botão injetor para dentro

A memória de dose mostra-lhe agora a informação da sua última dose.



Leia a sua memória de dose

O exemplo acima mostra-nos que foram injetadas 12 unidades há 1 hora, 52 minutos e 3 segundos.

Mantenha um registo de doses pessoal

Se tem um *smartphone*, *tablet*, computador, medidor de glicemia ou outro dispositivo que também suporte a tecnologia NFC (*Near Field Communication*), pode transferir o histórico de injeções da sua caneta para um destes dispositivos. Certifique-se apenas de que o seu dispositivo tem uma aplicação compatível ou outro programa que consiga ler e mostrar a informação das suas injeções.



As canetas inteligentes são compatíveis com os cartuchos de insulina da Novo Nordisk.

NovoPen® 6 e NovoPen Echo® Plus são dispositivos médicos. Canetas inteligentes que registam automaticamente a informação de cada injeção de insulina. Precauções de utilização: não deixe cair a sua caneta nem bata com a mesma em superfícies duras. Mantenha a sua caneta ao abrigo da luz direta do sol e não a exponha a pó, suidade, líquidos ou temperaturas extremas. Não tente reparar a sua caneta nem desmontá-la. A sua caneta tem uma pilha de lítio no interior. Para sua segurança, a pilha não é substituível. A caneta deve ser mantida seca. Quando a caneta tiver um cartucho de insulina colocado, veja as instruções de conservação no folheto informativo do cartucho. Quando a caneta não tiver um cartucho de insulina colocado, conserve a sua caneta à temperatura ambiente. Não guarde a sua caneta com uma agulha colocada. Não congele a sua caneta nem a guarde no frigorífico ou perto de geradores de frio. Para mais informações, ler cuidadosamente a rotulagem e instruções de utilização contidas na embalagem. NovoPen® 6 e NovoPen Echo® Plus são marcas registadas da Novo Nordisk A/S.

A NovoPen® 6 oferece uma dose máxima de 60 unidades em aumentos de 1 unidade. A NovoPen Echo® Plus oferece uma dose máxima de 30 unidades em aumentos de 0,5 unidades.

