

Regulatory Operations

Card: 2010-148,5x115-913-dev
LIFT - Current 1

NovoPen 6
INFORMATION CARD

Colour: PMS 280C + CMYK

A NovoPen® 6 regista as suas injeções

A NovoPen® 6 tem uma memória de dose com um visor que mostra a informação da sua última injeção. O número na parte de cima mostra as unidades que foram injetadas da última vez. Em baixo, pode ver as horas, minutos e segundos que passaram desde a sua última injeção.

A memória de dose também guarda o histórico das suas injeções durante os últimos três meses. Ver o verso para mais informações sobre como usar esta funcionalidade para manter um registo pessoal das suas injeções.

Para mais informações visitar novonordisk.com



5 unidades injetadas...

... há 3 horas, 45 minutos e 10 segundos




8-4260-67-901-1

Mantenha um registo pessoal das suas injeções

A memória de dose da NovoPen® 6 suporta a Comunicação por Campo de Proximidade (*Near Field Communication - NFC*). Se tem um *smartphone*, *tablet*, computador, medidor de glicemia ou outro dispositivo que também suporte NFC, pode transferir o histórico das suas injeções a partir da NovoPen® 6

para um destes dispositivos, de forma a manter um registo pessoal das suas injeções. Certifique-se, apenas, de que o seu dispositivo tem uma aplicação (*app*) compatível ou outro programa que possa ler e mostrar os dados das suas injeções.

Mantenha a memória de dose da caneta diretamente em contacto com o ponto NFC do seu dispositivo...

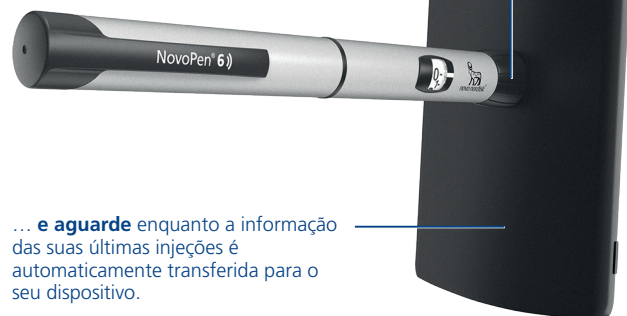

... **e aguarde** enquanto a informação das suas últimas injeções é automaticamente transferida para o seu dispositivo.





Project: PM2021-00332
Document: 8-4260-67-901-1_v4.pdf
Document description:
Document Lifecycle State: Draft
Version: 1
Version ID: 00002_0000192796
Downloaded: Jan 5, 2022 at 8:03 PM GMT+00:00
By: Rocha, Maria Paula (PROC@NOVONORDISK.COM)
Approval state: **Draft**